

詳しくは、ホームページで panasonic.biz/healthcare/biomedical

散薬調剤のヒューマンエラーを減少 医療過誤を未然に防止します

散薬の調剤作業中に起こるかもしれない人的ミス。その可能性を徹底解析したシステムと操作性、チェック機能により、調剤過誤を未然に防ぎます。「調剤システムコントローラー」や「メディコムダイレクト接続ソフト」との連携で、処方入力を二度打ちする手間がありません。薬剤充填時には、容器に付けられたJANコードと薬剤瓶のバーコードをスキャナー照合し、ヒヤリハットやミスを見逃しません。

薬剤瓶の確認



計量値の確認



- point 1 薬品マスタを自動ダウンロード
処方入力是一次だけ


薬品マスタを自動的にダウンロードできるので、処方入力の二度打ちは不要です。新薬採用もスムーズにできます。
- point 2 調剤室の場所を取らない
コンパクト設計

液晶タッチパネルモニターの採用で、キーボードや制御用パソコンを置くための余分なスペースがいりません。
- point 3 薬剤瓶への充填時も安心
バーコード照合でミス防止

薬剤瓶への充填時には、容器(箱)に付けられたJANコードと薬剤瓶のバーコードをスキャナー機能で照合できます。
- point 4 散薬分包機との接続機能を標準装備
スムーズなデータ送信

散薬分包機との接続機能を標準装備しているので、患者データや処方データを直接送信できます。
※散薬分包機メーカーによっては、別途費用が必要な場合もあります。

運用フローチャート

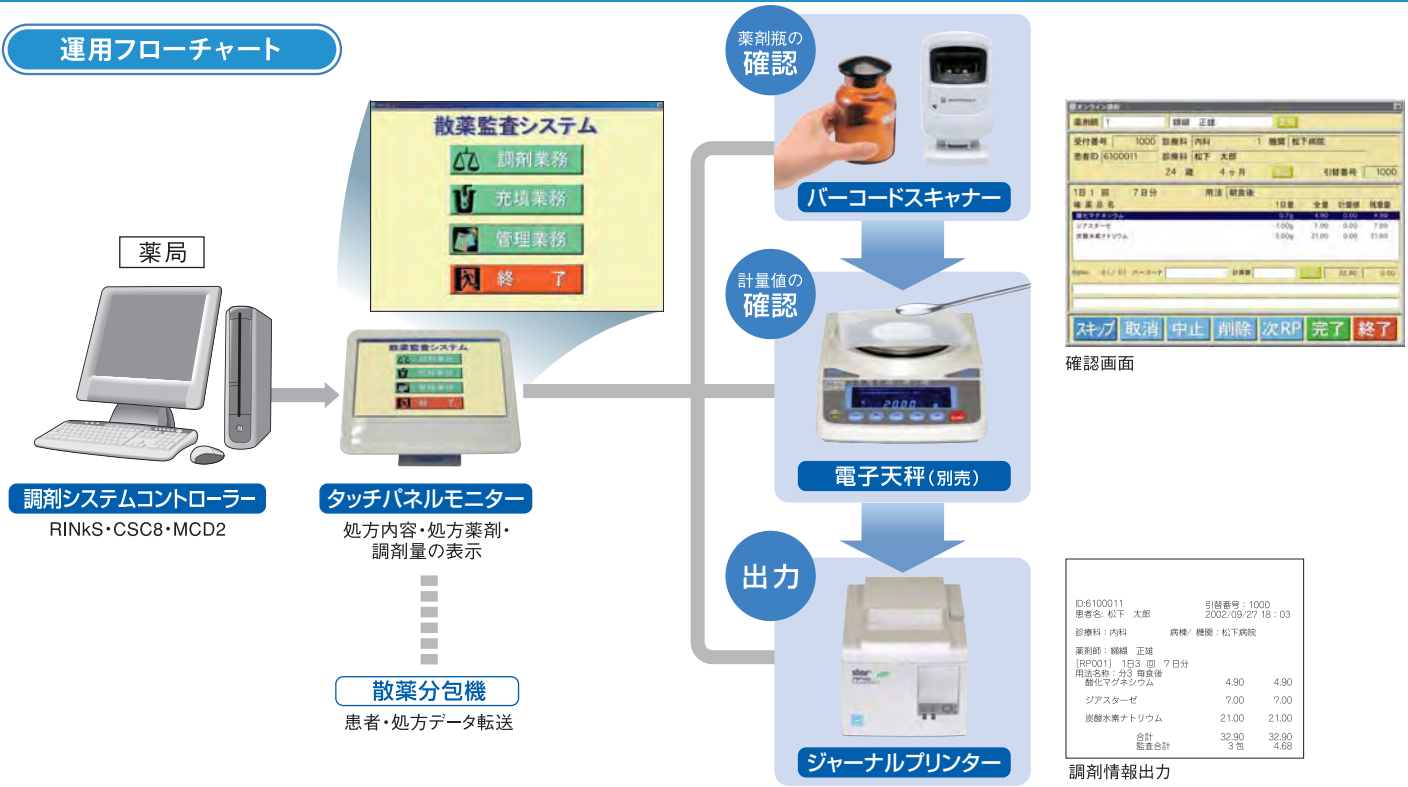

確認画面

調剤情報出力

ID:6100011	引継番号: 1000
患者名: 松下 太郎	2002/09/27 18:03
診療科: 内科	病棟/ 機室: 松下病院
薬剤師: 藤崎 正雄	
[RPO01] 1日3回 7日分	
用法名: 水30ml直後	
酸化マグネシウム	4.90 4.90
ジスターゼ	7.00 7.00
炭酸水素ナトリウム	21.00 21.00
合計	32.90 32.90
監査合計	3包 4.68

調剤情報出力

別売



◎ 電子天秤

調剤に必要な薬剤を計量します。その情報はモニターに送信されます。すでに使用されている電子天秤の場合は、弊社にお問い合わせ下さい。



薄型のコンパクト設計

タッチパネルモニター

パソコンを内蔵したモニター。タッチパネルのため、キーボードを置く必要なく調剤台が広く使える設計です。



薬剤瓶をかざしてチェック

バーコードスキャナー

バーコードで、調剤に必要な薬剤瓶の確認、充填する薬剤瓶、充填薬剤などの確認ができます。



調剤情報の出力

ジャーナルプリンター

散薬調剤の監査内容を、処方ごとに出力します。監査や検薬時に威力を発揮するジャーナルです。

仕様

品名	内容	外形寸法	本体重量	使用電源	温度範囲
タッチパネルモニター	タッチパネル10.4インチTFTカラーLCD搭載PC	幅205mm×奥行27mm×高さ152mm	約1.30Kg(バッテリー含)	単相100V~240V	0℃~35℃
ジャーナルプリンター	サーマルプリンター 用紙幅80mmオートカッター付	幅142mm×奥行204mm×高さ132mm	約1.72Kg	単相100V±10%	5℃~45℃
バーコードスキャナー	可視光半導体レーザー式 1500スキャン/秒 各種バーコード対応	幅82.1mm×奥行80mm×高さ140mm	約269g	単相100V±10%	0℃~40℃

別売

品名	内容	外形寸法	本体重量	使用電源	温度範囲
電子天秤 (FZ-300iR)	レンジ (320g/0.01g) 自己補正機能付 (分銅内蔵型) 国家検定付 RS-232C 出力ボードおよび接続ケーブルが必要	幅193mm×奥行262.5mm×高さ84.5mm	約3.0Kg	単相100V+10%~15%	10℃~30℃

●お問い合わせは

パナソニック ヘルスケア株式会社
 マーケティング本部 バイオメディカ営業統括グループ
 〒105-8433
 東京都港区西新橋2丁目3番5号 西新橋MFビル

北海道営業所 TEL 011-231-7113 FAX 011-271-0714
 東北営業所 TEL 022-266-2131 FAX 022-215-5582
 薬局システム東日本営業所 TEL 03-5408-7276 FAX 03-5408-0873
 中部営業所 TEL 052-551-0822 FAX 052-551-3490
 薬局システム西日本営業所 TEL 06-6136-1419 FAX 06-6136-1449
 中国営業所 TEL 082-247-7532 FAX 082-240-2701
 九州営業所 TEL 092-292-7719 FAX 092-291-5353

このカタログの記載内容は
 2014年9月現在のものです。

1207 B 5730

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●実際の製品には、ご使用の注意を表示しているものがあります。